


**Активное ношение трейнера
LM-Activator является
исключительно важной частью
ортодонтического вмешательства.**



Наш улыбающийся кролик LM-Bunny отвлечёт детей от пугающих моментов при посещении стоматологической клиники.

LM-Activator упакован в красивый практичный контейнер, в котором легко хранить и носить трейнер. Контейнер гигиеничен, не ограничивает доступ воздуха к содержимому. На крышку контейнера Ваш ребёнок может прикрепить одну из картинок с изображением кролика LM-Bunny. Он может сделать это в клинике вместе с врачом-ортодонтом. Картинку можно обменять при следующем посещении. Так же маленькому пациенту выдают дневник и аксессуары к нему.

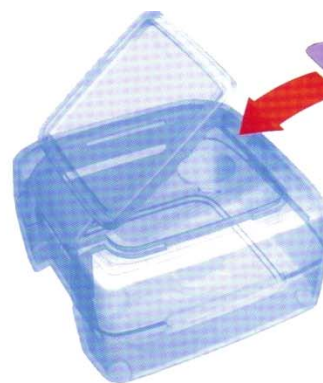

Ортодонтическое вмешательство
для детей

LM – Activator Инструкция



- До и после использования промойвай устройство чистой водой. Не забывай споласкивать контейнер!
- Для дезинфекции устройства опусти его в кипящую воду на несколько минут.
- Храни LM-Activator в контейнере с открытой крышкой.
- Напиши своё имя на контейнере и прикрепи на крышку изображение кролика Банни или любую другую картинку.
- Бережно относись к устройству и постарайся не потерять его.
- Собаки любят жевать вещи, сделанные из силикона. Храни LM-Activator в недоступном для собак месте!
- Если в первые дни ношения у тебя ноют зубы и десны, не расстраивайся. Если ты носишь LM-Activator так, как это рекомендовал врач, эти неприятные ощущения пройдут через несколько дней.



Только регулярное ношения устройства LM-Activator даст желаемый результат – красивую улыбку и хороший прикус!

ДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- Вставь устройство в рот и сомкни губы.
- Надави зубами нижней челюсти на устройство, сосчитай до десяти и расслабься
- Делай так от 30 до 60 минут
- Ты можешь разделить время дневного ношения на несколько частей, как тебе удобно. Лучше всего на 4 раза по 30 минут или 2 раза по 60 (например, с 4 до 5 часов вечера, а потом с 8 до 9).
- Всегда отмечай наклейкой в дневнике Банни, что ты носил устройство днём.
- Если ты будешь активно и регулярно носить устройство днём, скоро твой прикус настолько улучшится, что ты сможешь надевать LM-Activator только ночью.

НОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- Перед сном вставь устройство в рот и сомкни губы
- Не забудь отметить в дневнике Банни, что носил устройство ночью.
- Если ночью устройство выпадает у тебя изо рта, не делай отметки в дневнике Банни.

Днём обязательно надень устройство на два часа.

LM Activator

Шаг за шагом С дневником



Расположи устройство во рту,
как тебя учили в клинике:

- Сторону с широкими углублениями надень на верхние зубы
 - Прижми устройство к зубам верхней челюсти и прикуси LM-Activator зубами нижней челюсти. Сомкни губы.
 - Стоматолог даст тебе наклейки.
- Отмечай дни, когда ты носил LM-Activator, наклейкой на тропинке, они помогут тебе отслеживать успехи в лечении.
- Обязательно бери свой дневник Банни на прием к врачу!

Эксклюзивный представитель в Украине
СП «Промед», ул. Лысенка 4а, Киев, 01034, Украина
Тел: 278-7339, 278-7346, 050 446-39-67, 050 418-35-05, 050 441 85 54
Факс: (044) 278-6245
E-mail: admin@promed.ua www.promed.ua

