

Етап 1. Створення облікового запису 3shapecommunicate

1. Зайдіть на сайт та почніть реєстрацію <https://portal.3shapecommunicate.com>

Log in to your account

Email

.....

Login

I forgot my password
Activate my account

Or create new account

At 3Shape Communicate you can:

- Set up and manage connections to labs or practices
- View and manage your cases
- Manage your 3Shape Communicate™ profile

2. Натисніть **CREATE NEW ACCOUNT**
3. Виберіть відповідну опцію – чи є ви користувачем продуктів 3shape (пункт 1) чи ні (пункт 2)

1

I am a 3Shape software user

2

I am a practice, but do not own a 3Shape product

4. Почніть вводити інформацію для реєстрації. Заповнити необхідно всі поля.

5. Щоб перейти до наступного кроку натисніть **NEXT**

6. Обов'язково підтвердіть вашу адресу електронної пошти

Step 1

Enter your login information

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Email

Email

Password

Password

Confirm password

Confirm password

Next →

Step 2

Enter your account information

Account Name

Country

City

Street Address

Postal Code

Phone Number

← Previous

Next →

Step 3

Enter 3Shape dongle number

Dongle
Number

← Previous

Next →

Step 4

Are you a dental practice, lab or manufacturer?

Select role

Practice

← Previous

Create account →

Thank you for registering a 3Shape Communicate account. **IMPORTANT:** We've sent an account activation email to your email inbox. Please activate your account by clicking the link included in the email.

OK

Step

Are

Select role

Practice

← Previous

Create account →

zshape

communicate

Enable your account to share cases with select orthodontic solution providers

Set up and manage connections to labs and practices

View and manage your cases

Manage your profile

Login

Sign up ▾

[Forgot password](#)


[Activate account](#)

Після завершення реєстрації та підтвердження електронної пошти ви можете зайти в Ваш акаунт.

Етап 2. Підключення пристроїв та програм до 3sharecommunicate

Якщо Ви власник TRIOS

1. Натисніть на іконку **БІЛЬШЕ**
2. Натисніть на значок **НАЛАШТУВАННЯ** – з'явиться нове меню
3. У меню, що з'явилося, виберіть **КОРИСТУВАЧІ**
4. Натисніть **ДОДАТИ** та заповніть необхідні поля
5. У розділі «Оліковий запис 3shape Communicate» введіть Ваші дані
6. Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**

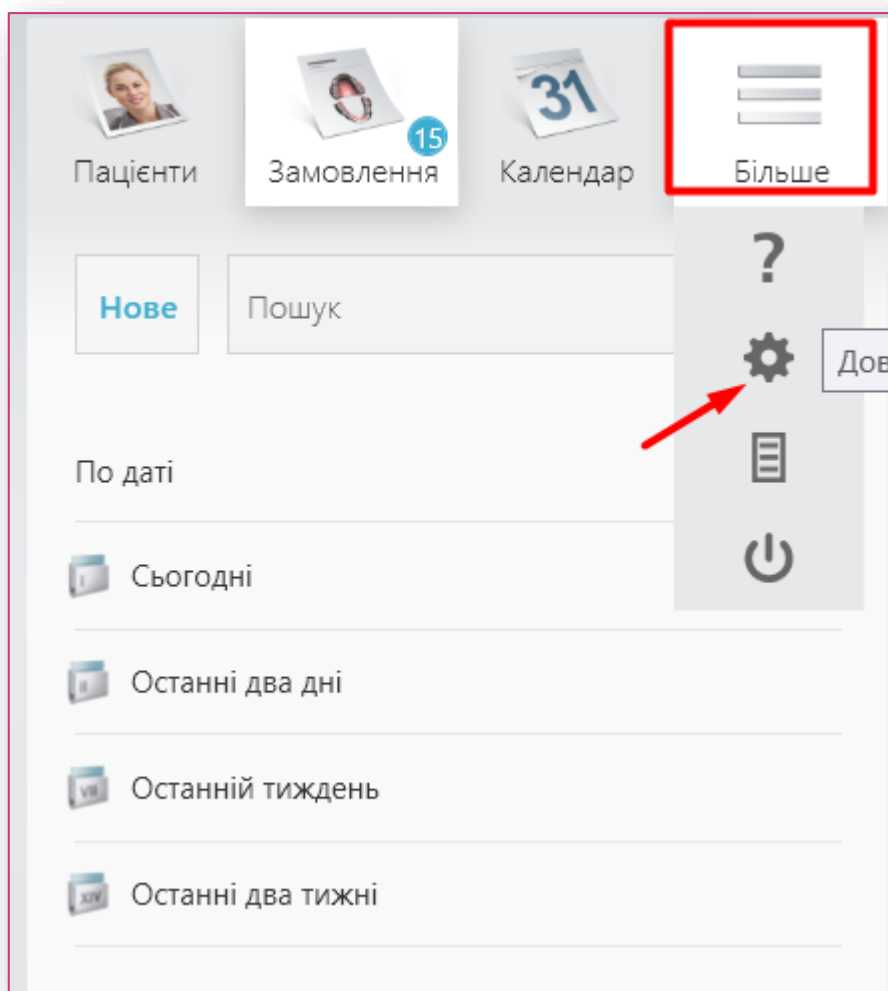

Пацієнти Замовлення ¹⁵ Календар ³¹ Більше

Загальне ▼

- Інформація
- Користувачі**
- Регіональні налаштування
- Форма замовлення
- Рез. копія та відновлення
- Версії програми та підписки >


Налаштування

Тут можна змінити всі налаштування.

- Якщо вибрати категорію ліворуч, відобразяться її підкатегорії
- Вибравши підкатегорію, можна переглядати та змінювати налаштування


Пацієнти Замовлення ¹⁵ Календар ³¹ Більше

Додати Копіювати Видалити

verokobra 

Ім'я: verokobra

Пароль:

Фото:  **Додати**

Персональні налаштування

Система кольорів: Vita Classical ▼

Бажана стартова сторінка: ▼

Є адміністратором:

Обліковий запис 3Shape Communicate

Увійти (ел. пошта):

Пароль:


Гранична дата: **Вкажіть дату**

Дозволити іншим кори...:


Тестувати з'єднання: **Тестувати**

Якщо Ви власник програм 3shape

1. Зайдіть в **CONTROL PANEL**
2. Виберіть **DONGLE SERVICE**
3. Натисніть **КОНФІГУРАЦІЯ** та введіть Ваші дані **3shape Communicate**
4. Натисніть **OK**
5. Натисніть **КОНФІГУРАЦІЯ** у вкладці Trios Direct Connection

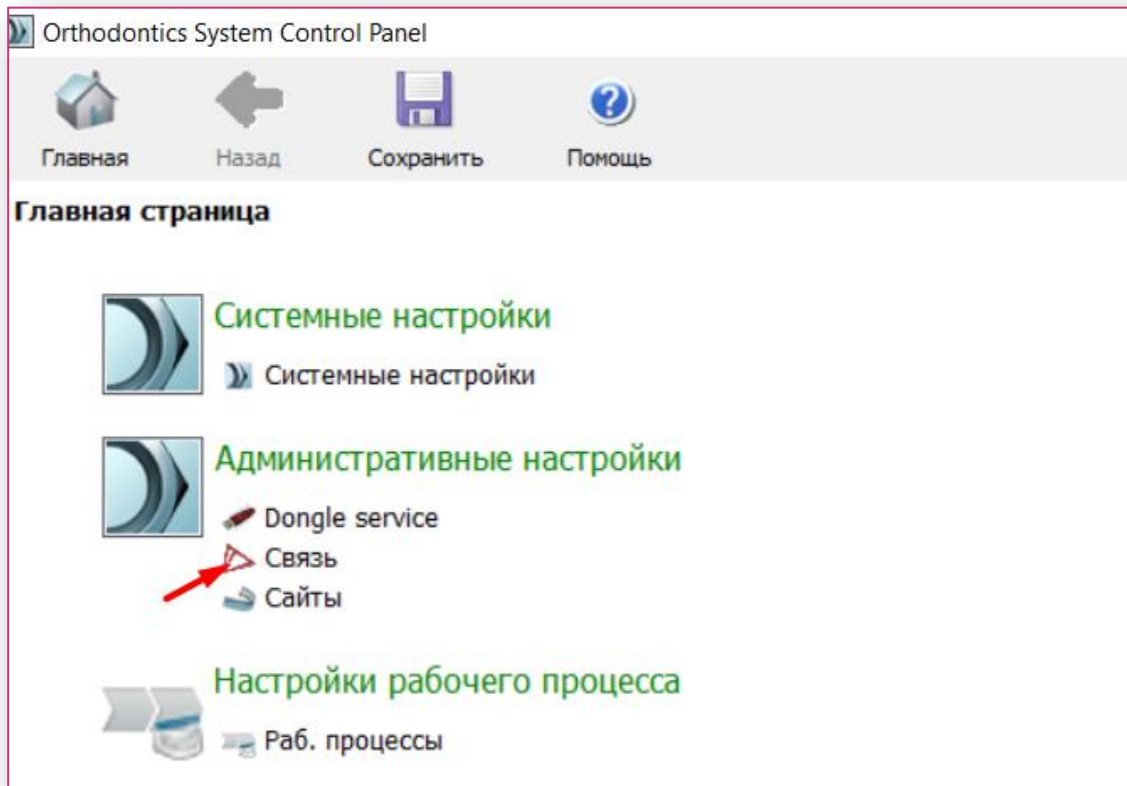

Настройки интеграции 3Shape Communicate

 Включено


Эл.почта

Пароль

У меня нет уч. записи

Расшир. возможности

Настройки интеграции 3Shape Communicate

 Включено

Эл.почта

Пароль

У меня нет уч. записи

Расшир. возможности

Конфигурация TRIOS Direct Connection

 Включено

Расшир. возможности

Папка TRIOS Direct Connection

Ortho System Control Panel - 3Shape Communicate



Главная



Назад



Сохранить




Помощь

Административные настройки ▶ Связь


3Shape Communicate

Интеграция 3Shape Communicate

 Включено

Конфигурирование..


TRIOS Direct Connection

 Включено

Конфигурирование..

Етап 3. Підключення EASY ALIGN LAB для відправлення Вами замовлень, використовуючи 3shape Communicate

1. Натисніть на іконку **БІЛЬШЕ**
2. Натисніть на значок **НАЛАШТУВАННЯ** – з'явиться нове меню
3. У меню, що з'явилося, виберіть **ПІДКЛЮЧЕННЯ**
4. Виберіть тип організації, яку ви хочете додати: клініка, лабораторія, центр виготовлення
5. Натисніть **ДОДАТИ**
6. У вікні, що з'явилося ПОШУК
7. Введіть адресу електронної пошти **3shape Communicate** для підключення до Easy Align Lab– **NIKA@PROMED.UA**
8. Натисніть ПОШУК, очікуйте результат
9. Натисніть **ПІДКЛЮЧИТИСЯ**
10. Очікуйте на підтвердження від організації про додавання вашої клініки до списку замовників.

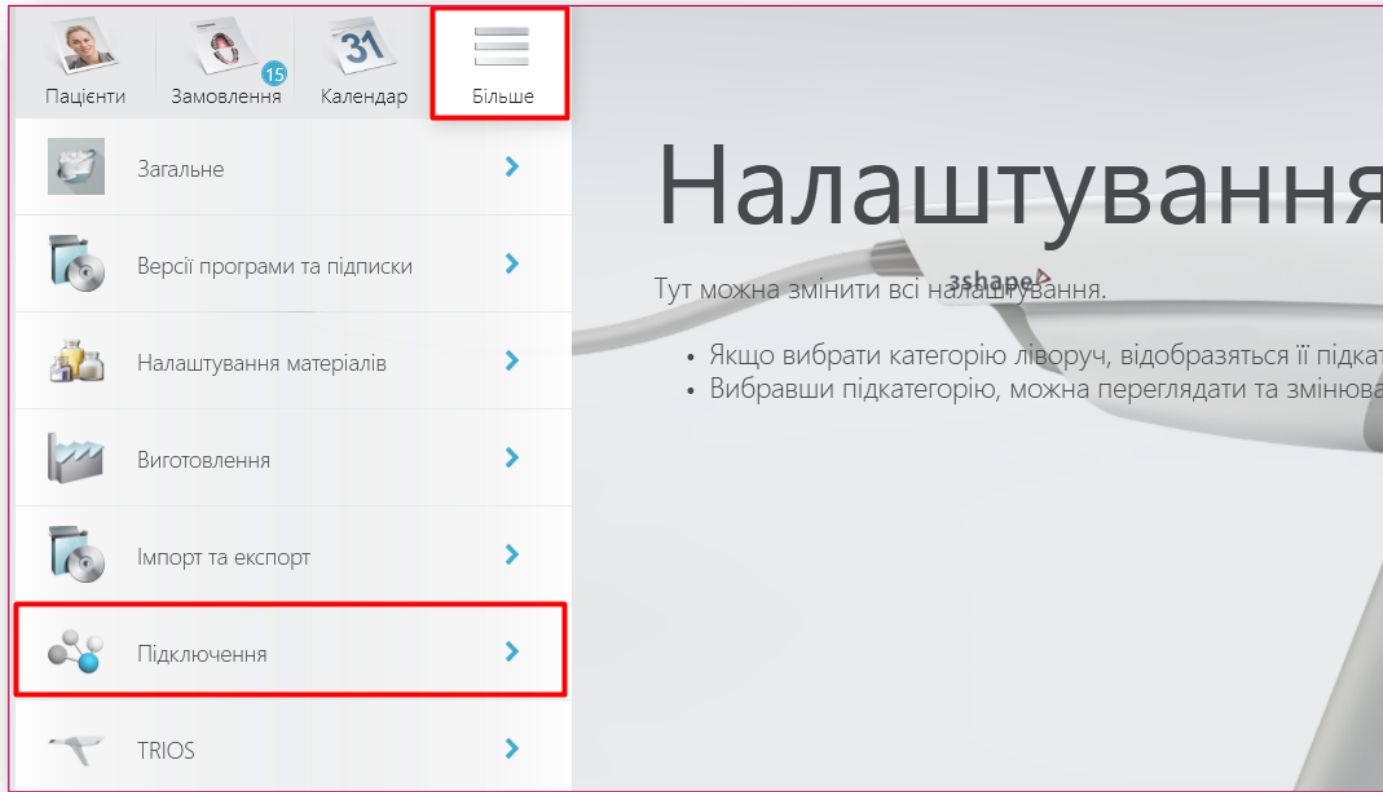

Пацієнти | Замовлення 15 | Календар 31 | Більше


Додати | Копіювати | Видалити

TRIOS Ready Ortho Clinic Denmark

TR

Відомості про підключення

Ім'я: TRIOS Ready Ortho Clinic

Логотип (рекомендований розмір: 320x80px): 

Адреса: Holmens Kanal 7

Поштовий індекс: 1060

Місто:

Країна:

Електронна пошта: trios.ready.ortho.clinic@3shape.com

Номер телефону: +4570272620

Вид:

Клініка:

Лабораторія:

Загальне

Версії програми та підписки

Налаштування матеріалів

Виготовлення

Імпорт та експорт

Підключення

Клініки

Лабораторії

Центри виготовлення

TRIOS

Пацієнти | Замовлення 15 | Календар 31 | Більше


Додати | Копіювати | Видалити

TRIOS Ready Ortho Clinic Denmark

TR

Відомості про підключення

Ім'я: TRIOS Ready Ortho Clinic

Логотип (рекомендований розмір: 320x80px): 

Електронна пошта: trios.ready.ortho.clinic@3shape.com

Номер телефону: +4570272620

Вид:

Клініка:

Лабораторія:

Додати підключення

Будь ласка, виберіть що для вас зручніше: знайти з'єднання через 3Shape Communicate чи додати нове з'єднання вручну.

Пошук | Вручну

Загальне

Версії програми та підписки

Налаштування матеріалів

Виготовлення

Імпорт та експорт

Підключення

Клініки

Лабораторії

Центри виготовлення

TRIOS



Підключитися

Уведіть адресу ел. пошти або ім'я для підключення

Пошук



Підключитися

Уведіть адресу ел. пошти або ім'я для підключення

Пошук

Результат

Вкажіть вид сайту для "redacted"


Клініка

Лабораторія


Центр виготовлення

Підключитися



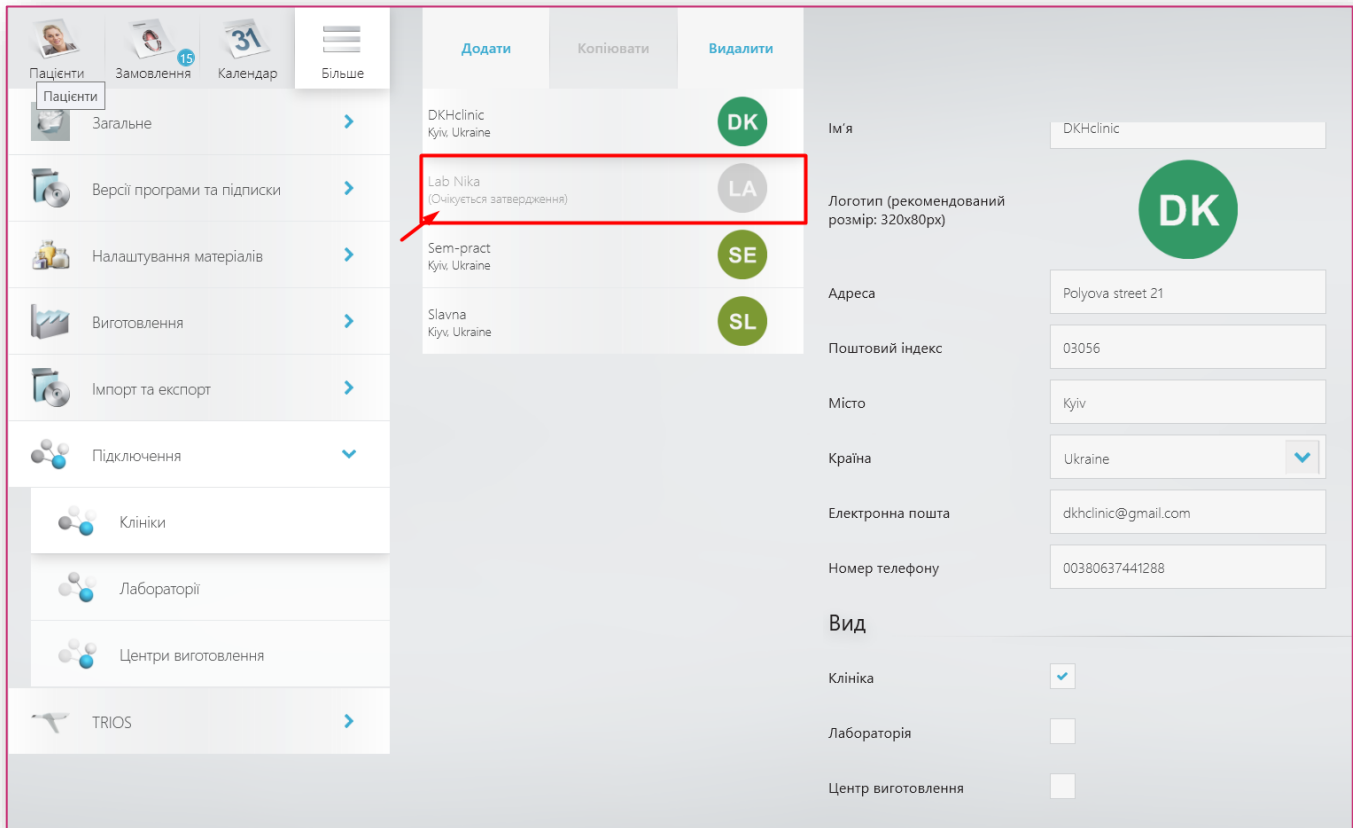

1. Щоб відправити замовлення\скан **ОДИМ КЛІКОМ** до початку сканування виберіть організацію, в яку ви будете відправляти замовлення
2. Якщо у вибраної вами організації є активний акаунт **3shape Communicate** – в кінці **WORKFLOW** з'явиться іконка відправки замовлення

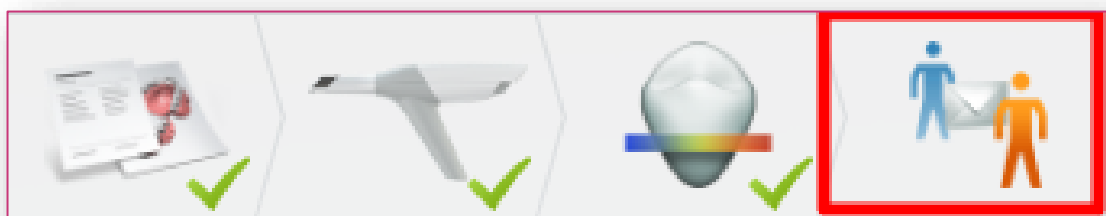



Надіслати до



In-house



DKHclinic



Sem-pract



Slavna



TRIOS Ready Ortho Clinic



Скасувати

Вкажіть підключення за промовчанням

PRO  **MED**®